

# Respireo

Primo F



Simple & pratique, le Respireo™ Primo F est un **masque naso-buccal** réglable et facile d'utilisation.

Disponible en version À Fuite et Sans Fuite, ce masque répond à tous les besoins de ventilation et assure un confort optimal à vos patients.

Il est aussi particulièrement indiqué pour des patients ayant une respiration buccale, des hautes pressions de traitement, ou encore une habileté manuelle réduite.



## Simple & pratique

 **Air Liquide**  
HEALTHCARE

# Respireo

## Primo F




### Bulle à double jupe

- La bulle en silicone à double jupe offre une étanchéité optimale en s'adaptant au visage des patients




### Appui frontal ajustable

- La molette de réglage permet d'ajuster de manière personnalisée le support frontal en silicone sur le front du patient afin de stabiliser le masque et de soulager les points de pression sur le visage

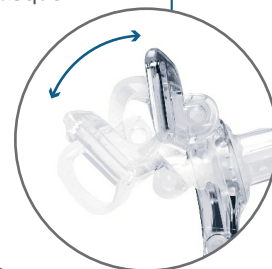


### Clip en « V »

- Ce système d'attache facilite la fixation du harnais et permet un retrait rapide en cas d'urgence

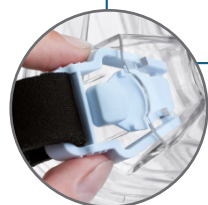

### Fuite diffuse et silencieuse

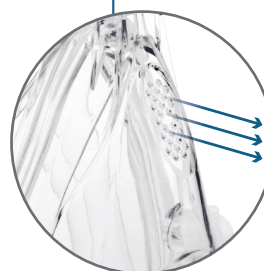

Ce masque existe aussi en **version Sans Fuite**

Un harnais à 4 points d'ajustement pour une meilleure stabilité et répartition des points de pression



Code produit	Description	Taille	Code distributeur
472530	Respireo™ Primo F	S	KM217900
472531	Respireo™ Primo F	M	KM218000
472532	Respireo™ Primo F	L	KM218100
472533	Respireo™ Primo F Non Vented	S	KM218200
472534	Respireo™ Primo F Non Vented	M	KM218300
472535	Respireo™ Primo F Non Vented	L	KM218400

### Pièces détachées :

472615	Bulle Respireo™ Primo F/Hospital F x10	S	KM218500
472616	Bulle Respireo™ Primo F/Hospital F x10	M	KM218600
472617	Bulle Respireo™ Primo F/Hospital F x10	L	KM218700
472456	Harnais standard	-	KM224000

### Fabriqué par

AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.r.l  
Via Bisceglie, 66 - 20152 Milano (MI) - ITALY  
PLANT: Via dei Prati, 62 - 25073 Bovezzo (BS) - ITALY  
Tel. +39 030.201.59.11  
Fax +39 030.209.83.29

### Contact distributeur

AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.A.  
Parc de Haute Technologie  
6, rue Georges Besse  
92182 Antony Cedex  
France

fr.medicaldevice.airliquide.com

Hotline ALMS : **0 820 146 359** Service 0,12 €/min + prix appel

**Air Liquide**  
HEALTH CARE

Respireo™ Primo F est un masque oronasal réutilisable avec des fuites d'expiration calibrées (Vented) destiné à être utilisé à domicile ou en milieu hospitalier pour un unique patient adulte (pesant plus de 30 kg) ayant reçu une thérapie de ventilation non invasive à pression positive (VNIPP), par exemple une thérapie des voies aériennes à pression positive continue (PPC) ou Bilevel (BiPAP).  
Respireo™ Primo F Non Vented est un masque oronasal réutilisable sans fuites d'expiration calibrées destiné à être utilisé à domicile ou en milieu hospitalier pour un unique patient adulte (pesant plus de 30 kg) en ventilation non invasive contrôlée à pression positive (VNIPP).

Dispositifs médicaux de classe IIa CE 0051 (\*) - Remboursés par l'assurance maladie dans certaines situations : consultez les modalités sur le site amel.fr - Lire attentivement le manuel d'utilisation. Date de mise à jour : Juin 2023  
Air Liquide Medical Systems, Antony 348 921 735 R.C.S Nanterre.